


AlphaScope™ II la nueva generación

Los AlphaScope™ II son productos de calidad superior, que han sido fabricados según la más avanzada tecnología y los más modernos métodos.

Un nuevo sistema de lentes cilíndricas y una óptima estructura de vidrio otorgan una luminosidad de imagen única y una brillante visualización del detalle, tanto en el centro de la imagen, como también en los márgenes. Una reproducción del color especialmente natural y una profundidad de campo extraordinaria aseguran una representación muy fiel a la realidad. Cristales protectores distales y proximales de zafiro conceden una resistencia al rayado sumamente alta.

Los AlphaScope™ II garantizan una excelente resistencia a los tratamientos por autoclave gracias a juntas soldadas, en algunos puntos con láser. Incluso bajo la utilización del ciclo "PRIONS" francés de 18 min. a 2,3 bar y 134°C, se consigue una durabilidad extraordinaria del endoscopio. Sobre nuestros AlphaScope™ II damos una garantía de 2 años.

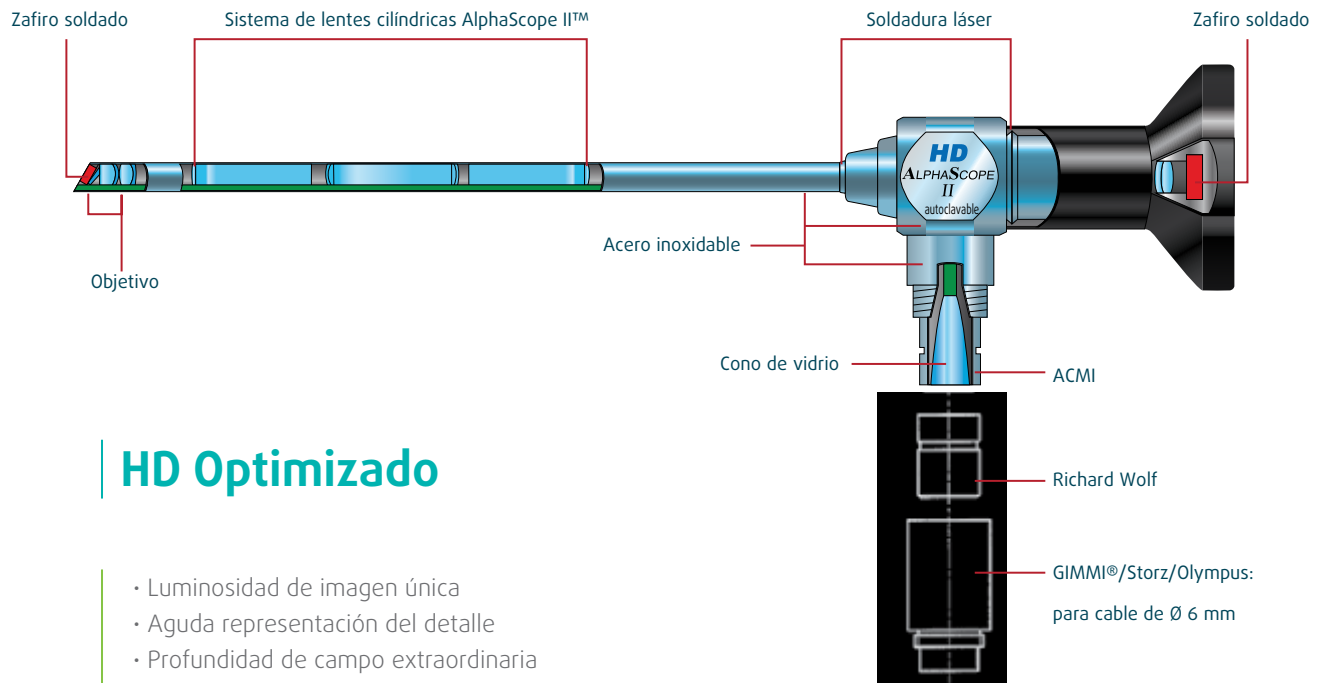

HD Optimizado

- Luminosidad de imagen única
- Aguda representación del detalle
- Profundidad de campo extraordinaria
- Alta resolución y restitución de contraste
- Gran ángulo del campo
- Extraordinaria resistencia al autoclave
- 24 meses de garantía
- Cristales protectores de zafiro

AlphaScope™ II la nueva generación

WA

Objetivo gran angular WA

El objetivo gran angular proporciona un mayor campo visual

HM

Reproducción de altura lineal

HM ofrece al observador una imagen mayor con el mismo brillo.

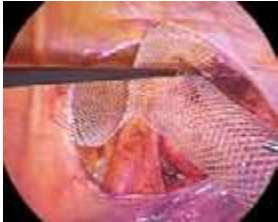


Imagen de un laparoscopio
sin High Magnification


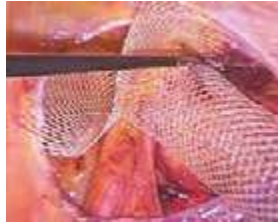


Imagen de un laparoscopio
con High Magnification

Campo visual



Perspectiva

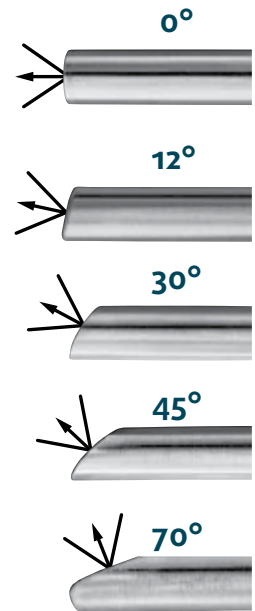

Gimmi® GmbH

Carl-Zeiss-Strasse 6
78532 Tuttlingen, Germany
Teléfono +49 7461 96590-0
contact@gimmi.de
www.gimmi.de

Vitalmex®

Bld. Adolfo Ruíz Cortinez 4284,
Colonia Jardines del Pedregal,
Coyoacán, 04500, México, D.F.
Teléfono +52 55 8850-1100
www.vitalmex.com.mx