

Alta calidad de imagen en una impresora láser compacta.



Konica Minolta DRYPRO Sigma II

Óptimas imágenes de diagnóstico


Con DRYPRO Sigma II, cree imágenes con una claridad y nitidez incomparables. Konica Minolta le pone a su disposición la más avanzada óptica de precisión que produce un tamaño de píxel de 50 μm , para sus necesidades de radiografía en general y mamografía. Avanzados algoritmos de procesamiento de imágenes optimizan simultáneamente la suavidad de la imagen y la nitidez del texto.

- Calidad de acabado estable con medición automática para mantener la densidad de salida usando la función de control de densidad
- El diseño fácil de usar permite una operación sencilla y una usabilidad intuitiva
- Los potentes algoritmos de procesamiento de imágenes optimizan tanto la suavidad de la imagen como la nitidez del texto
- Lector de imágenes en seco compacta de 2 bandejas y una capacidad de procesamiento de 70 hojas / hr. en películas de 14"x 17"

Imágenes de uso flexibles que satisfacen sus necesidades, en cualquier entorno.

Diseño que ahorra espacio

DRYPRO Sigma II es una impresora de imágenes en seco, de escritorio de 2 bandejas. Tiene un tamaño compacto de tan solo 65 x 63 cm² y está diseñado para integrarse en varios entornos hospitalarios y clínicos.

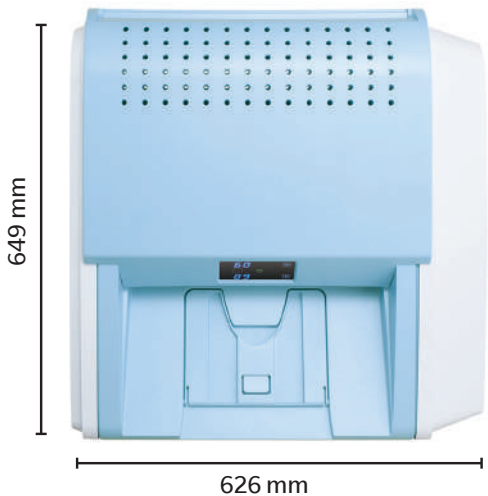

Flexibilidad en la configuración de la película

La película SD-S está disponible en 4 tamaños de película para las dos bandejas. Se pueden utilizar dos tamaños de película simultáneamente, lo que hace que el sistema sea muy versátil. El sistema automáticamente se calibra cada vez que se carga una bandeja de película con un nuevo número de lote.



DRYPRO y AeroDR son marcas registradas de Konica Minolta Healthcare Americas, Inc.
© 2021 Konica Minolta Healthcare Americas, Inc.

Paquete DRYPRO Sigma II


El paquete DRYPRO Sigma II es fácil de adquirir y usar con todas nuestras opciones para imagenología. Konica Minolta proporciona las mejores soluciones para hospitales y clínicas, ofreciendo una variedad de productos que se adaptan a sus necesidades.



Funciones de red diseñadas para entornos abiertos y flexibles

DRYPRO Sigma II es un generador de imágenes en red capaz de conectarse directamente a dispositivos compatibles con impresión DICOM.

Además de las funciones básicas de impresión en escala de grises DICOM, DRYPRO Sigma II es compatible con Presentation LUT, que permite que la película impresa se adapte con mayor precisión a los monitores de diagnóstico.

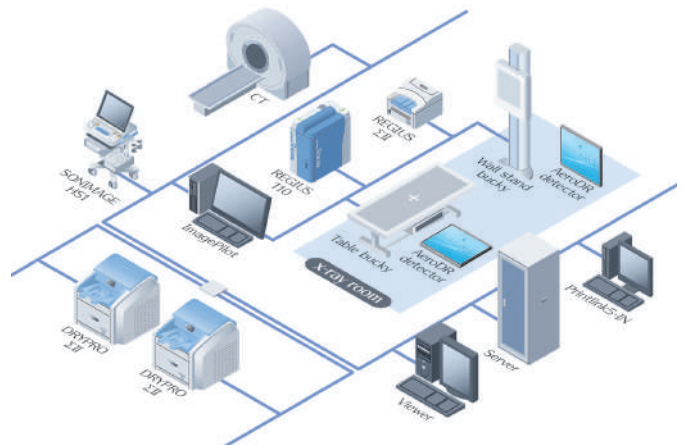

Ejemplo de configuración del flujo de trabajo



Konica Minolta Healthcare Americas, Inc.
411 Newark Pompton Turnpike
Wayne, New Jersey 07470
Tel: +1 (973) 633-1500
km.marketing@konicaminolta.com
healthcare.konicaminolta.us

M1788 0121 RevA